

# QUICKIE®

Pobaw się w aktywne połączenia...

## HeliX



Konfigurowalny aktywny wózek umożliwiający wydajne korzystanie z floty





## Quickie HeliX

### Aktywne konfiguracje...

Takie elementy, jak regulowana wysokość siedziska i oparcia, głębokość siedziska, środek ciężkości i kąt siedziska w połączeniu z podłokietnikami o regulowanej długości i podnóżkami o regulowanym kącie, zapewniają optymalne parametry ergonomiczne umożliwiające aktywne korzystanie

### Aktywne opcje...

Szeroki zakres opcji aktywnych i klinicznych, w tym specyfikacja hemiplegiczna. Opcje obejmują oparcia leżakowe o regulowanym kącie i komfortowe siedzisko.

### ... z efektywnym zarządzaniem flotą

Trwała i niezawodna konstrukcja z aluminium.

Wspólne części i akcesoria dla całej rodziny BasiX, RubiX i HeliX.

Model „XL” z czteroramiennym krzyżakiem jest odpowiedni dla użytkowników o wadze do 160 kg.



Regulowana głębokość siedziska od 41 do 51 cm.  
Regulacja środka ciężkości tylnego koła do 7,5 cm, co umożliwia łatwe obracanie i lepszą charakterystykę działania (standard)



Regulowane napięcie zawiesia oparcia i regulowana wysokość oparcia od 35-50 cm zapewniające optymalne aktywne parametry ergonomiczne i komfort (standard)



Oparcie z regulowanym kątem, aby sprostać wymaganiom użytkowników w pełni i częściowo aktywnych (standard)



Możliwość wyboru aktywnych i regulowanych podłokietników i osłon bocznych



Wybór lekkich stylowych kół, kół przednich i opon dla aktywnego użytkownika



Standardowy trójramienny krzyżak zapewniający sztywność, łatwe zginanie i odpowiedni napęd XL 160 kg wersja jest wyposażona w czteroramienny wysokowydajny krzyżak.



Jednoelementowy, odchylany, aktywny podnóżek usztywniający i zapewniający łatwy transfer (opcja)



Dwie opcje dla wieszaka (70°/80°), aby sprostać wymaganiom klienta (położenie nóg, długość wózka)



Uchwyty do popychania typu offset o regulowanej wysokości (opcja)



Podnóżek ma regulację kąta (+/- 15°), głębokości i wysokości (standard)



Siedzisko z regulacją wysokości i pochylenia kół tylnych za pomocą płyty tylnej półosi, obudowy kółka przedniego i widelca (standard)



Szeroki zakres oparć Jay J3 i pełny zakres poduszek Jay (opcja) w celu zapewnienia optymalnych aktywnych parametrów ergonomicznych i ułożenia



Wybór z pięciu kolorów



Wspornik dla amputantów (opcja)




Dostępne opcje dla stolika Nasuwany i odchylany (na zdjęciu, opcja)





## Szczegóły techniczne:

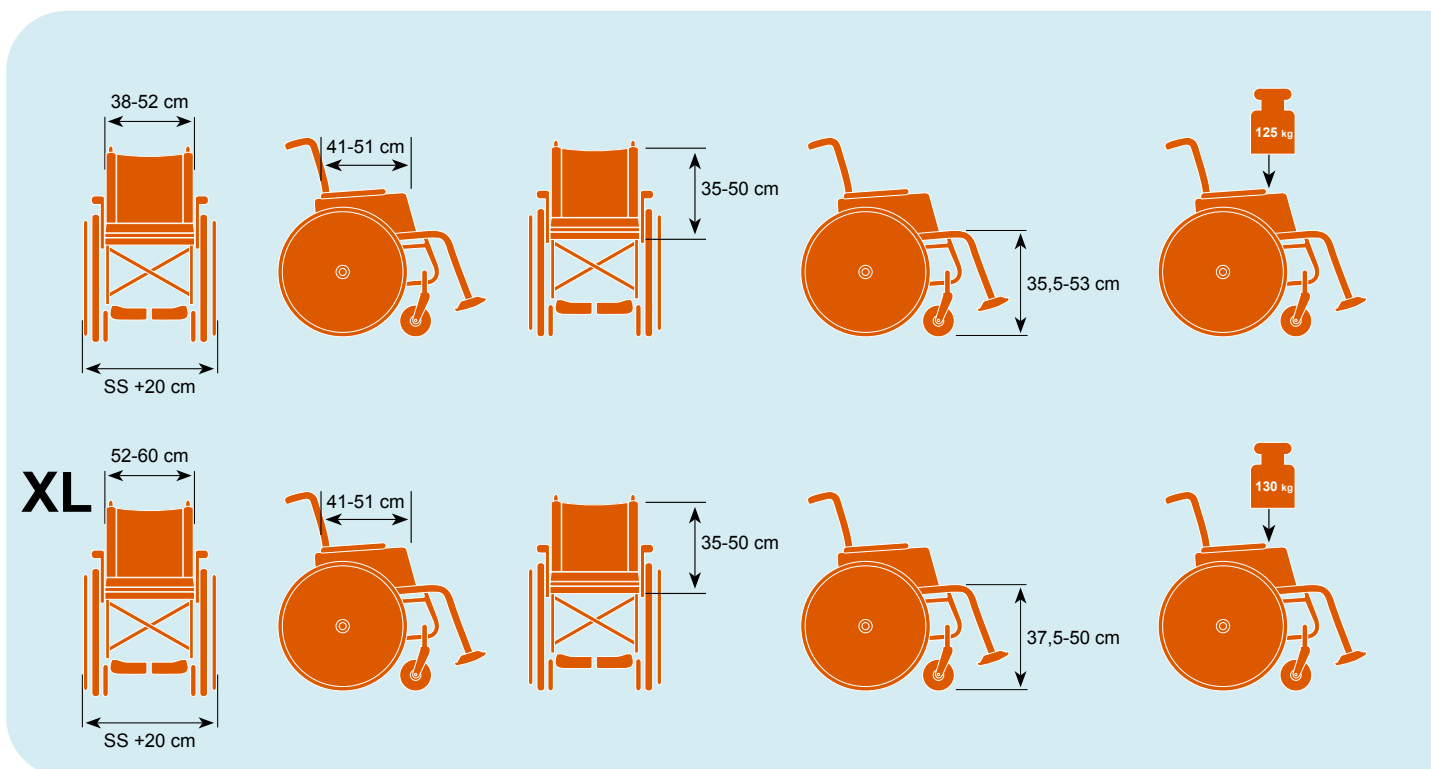

Całkowita wysokość:	96 cm	Kolor tapicerki:	czarny
Całkowita wysokość z podnóżkami:	109 cm	Zaakceptowany ciężar użytkownika:	125 kg /
Wysokość oparcia:	35 - 50 cm	wersja wzmocniona XL:	160 kg
Szerokość siedziska:	38 - 52 cm / wersja wzmocniona XL 52 - 60 cm	Maks. waga:	> 15,3 kg
Głębokość siedziska:	41 - 51 cm	Maks. waga XL:	> 16,3 kg
Szerokość po złożeniu:	32 cm		

\* Za pomocą modelu Quickie HeliX można transportować użytkownika tak, jak na fotelu pojazdu, o ile model jest stosowany razem ze standardowym zatwierdzonym systemem pasów zabezpieczających oraz systemem pasów bezpieczeństwa dla użytkownika.

**STLPS**<sup>™</sup>  
Sunrise Training and Education Programmes  
KNOWLEDGE FOR THE FUTURE



**SUNRISE**  
MEDICAL

Sunrise Medical GmbH & Co. KG  
Kahlbachring 2-4  
D-69254 Malsch/Heidelberg

T: +49 (0) 72 53 / 9 80-0  
F: +49 (0) 72 53 / 9 80-111  
[www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com)